

Odpowiednie dobranie rozmiaru butów



Obuwie Piedro® jest dostępne w 32 rozmiarach, od 15 do 46, przy czym większość butów jest dostępna w 8 szerokościach, które mogą się różnić w zależności od stylu. Korzystając z naszej tabeli rozmiarowej, bardzo łatwo jest dokładnie określić, jakiego rozmiaru i szerokości potrzebujesz.


Jak znaleźć rozmiar buta?

1. Przy pomocy "karty pomiaru" określ: długość, szerokość i obwód stopy.
2. W tabelach znajdź „długość stopy” i wybierz pomiar najbliższy temu, który wykonałeś.
3. Następnie znajdź najbliższy rozmiar szerokości, który odpowiada Twojemu pomiarowi.

Teraz masz wszystkie wymiary potrzebne do dokonania wyboru obuwia Piedro®.

Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji - wyślij nam swoje wymiary na adres:

biuro@eo-funktion.pl - chętnie pomożemy.

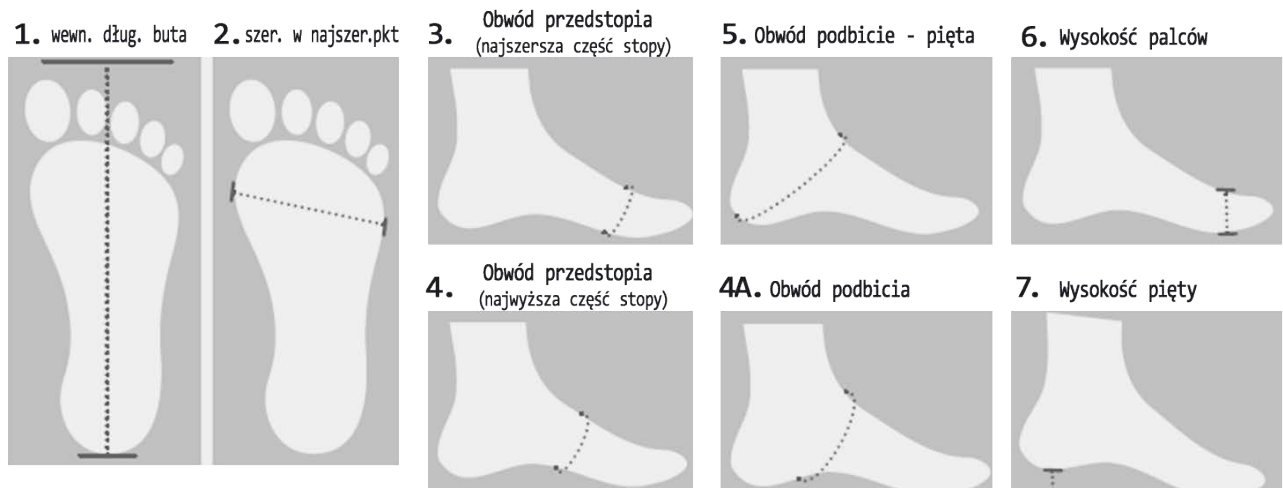

Prawidłowy pomiar stopy


INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki, aby idealnie dopasować buty.




1. Wydrukuj kartę pomiaru

Sprawdź, czy podczas drukowania tej strony nie używasz opcji „Dopasuj do strony”. Strona musi być zawsze wydrukowana w 100%. Podczas drukowania sprawdź linijką, czy skala jest prawidłowa.

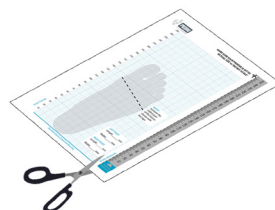


2. Pomiar szerokości

Wytnij wzdłuż linii przerywanej taśmę pomiaru szerokości. Zobacz jak należy ją umieścić, aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas dokonywania pomiarów.

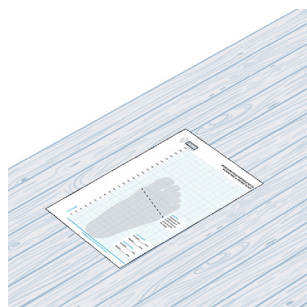

3. Umieść kartę pomiaru na twardej powierzchni

Umieść kartę na twardej, płaskiej i nieamortyzowanej powierzchni.

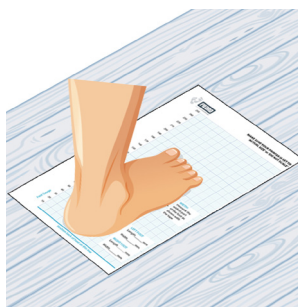

4. Umieść prawidłowo stopę

Położ stopę na karcie pomiaru i upewnij się, że tył pięty znajduje się na grubej linii. Upewnij się, że stopa jest obciążona.



5. Pomiar długości

Zanotuj długość stopy, zaznaczając ją na karcie pomiaru. Powtórz tę czynność dla drugiej stopy.



6. Pomiar obwodu

Potrzebujemy obwodu najszerzej części śródstopia, przeprowadź pomiar, jak pokazano na rysunku.



7. Pomiar szerokości

Zmierz najszerzą część stopy, będzie to to samo miejsce, w którym zmierzyłeś obwód.




8. Wybór właściwego rozmiaru

Zapoznaj się z tabelą rozmiarów na naszej stronie internetowej.

Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji, jaki rozmiar będzie najlepszy wyślij nam swoje wymiary na adres: biuro@piedro.com.pl, a chętnie pomożemy.

Upewnij się, że Twoja drukarka ustawiona jest na "rzeczywisty rozmiar" lub "nie skaluj"

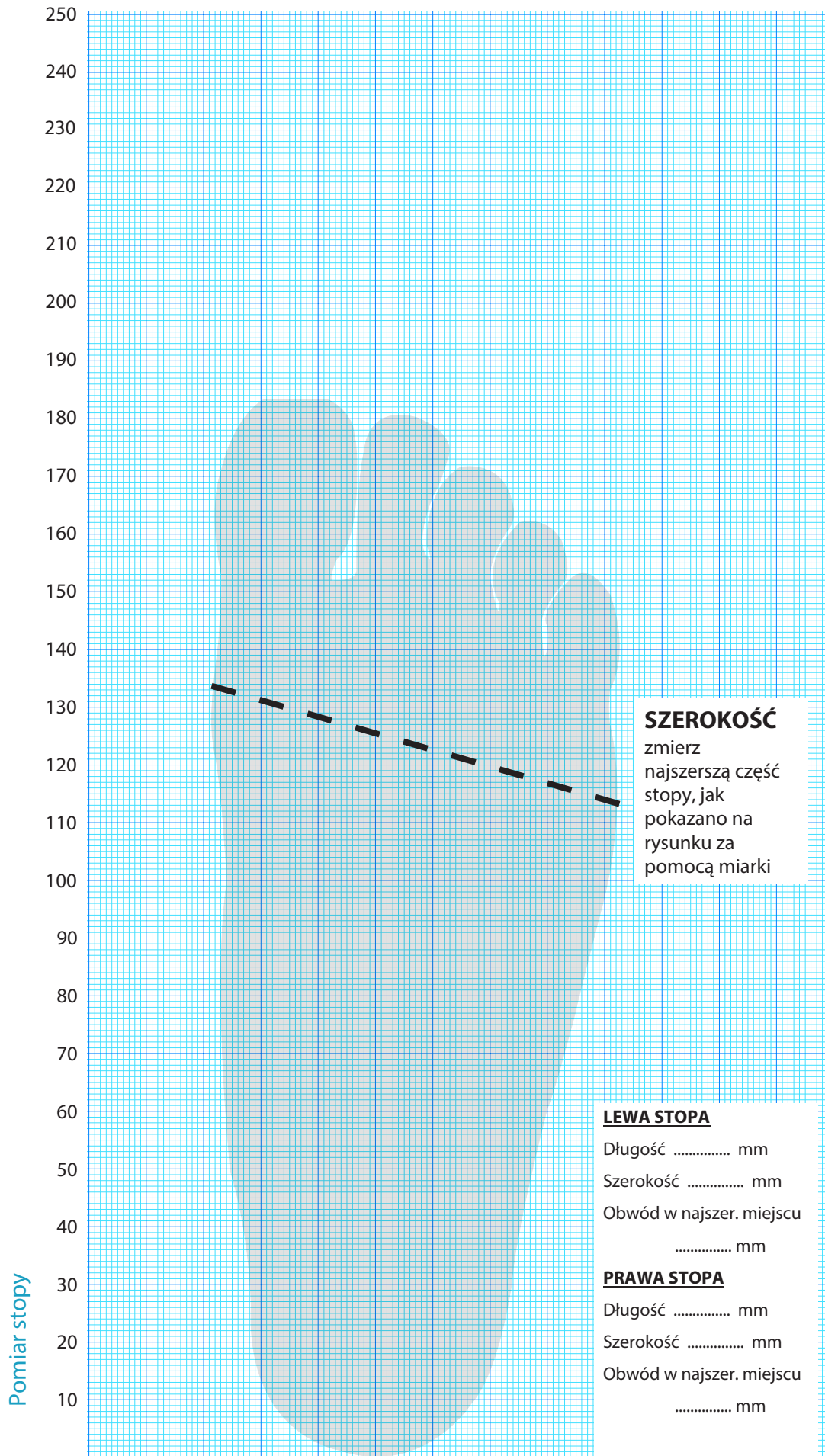

Umieść tył pięty na tej linii

Piedro® - tabela wymiarowa

Rehabilitacyjne

Stabilizujące

Derotacyjne

Rozmiar buta		Długość stopy (mm)	Długość wkładki buta (mm)	Szerokość 1.5		Szerokość 2.5		Szerokość 3.5		Szerokość 4.5	
EU	UK			szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)	szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)	szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)	szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)
15	0.5	90	100	41.00	108.5	43.00	113.50	45.00	118.50	47.00	123.50
16	1	96	106	43.00	112.50	45.00	117.50	47.00	122.50	48.00	127.50
17	1.5	102	113	44.00	116.50	46.00	121.50	48.00	126.50	50.00	131.50
18	2.5	109	120	46.00	120.50	48.00	125.50	50.00	130.50	52.00	135.50
19	3	115	127	48.00	124.50	50.00	129.50	52.00	134.50	54.00	139.50
20	4	121	133	49.00	128.50	51.00	133.50	53.00	138.50	55.00	143.50
21	5	128	140	51.00	132.50	53.00	137.50	55.00	142.50	57.00	147.50
22	5.5	134	147	53.00	136.50	55.00	141.50	57.00	146.50	58.00	151.50
23	6	140	153	55.00	140.50	57.00	145.50	58.00	150.50	60.00	155.50
24	7	147	160	56.00	144.50	58.00	149.50	59.00	154.50	61.00	159.50
25	8	153	167	57.00	148.50	59.00	153.50	61.00	158.50	63.00	163.50
26	8.5	159	173	59.00	152.50	61.00	157.50	63.00	162.50	65.00	167.50
27	9.5	166	180	60.00	156.50	63.00	161.50	65.00	166.50	66.00	171.50
28	10	173	187	62.00	160.50	64.00	165.50	66.00	170.50	68.00	175.50
29	11	179	193	63.00	164.50	65.00	169.50	67.00	174.50	69.00	179.50
30	12	185	200	65.00	168.00	66.00	173.00	69.00	178.00	71.00	183.00
31	12.5	192	207	66.00	171.50	68.00	176.50	70.00	181.50	72.00	186.50
32	13.5	198	213	67.00	175.00	69.00	180.00	71.00	185.00	73.00	190.00
33	1	205	220	69.00	179.00	71.00	184.00	73.00	189.00	75.00	194.00
34	2	212	227	70.00	183.00	72.00	188.00	74.00	193.00	76.00	198.00
35	2.5	218	233	72.00	187.00	74.00	192.00	76.00	197.00	78.00	202.00
36	3.5	225	240	73.00	191.00	75.00	196.00	77.00	201.00	79.00	206.00
37	4	232	247	75.00	195.00	77.00	200.00	79.00	205.00	81.00	210.00
38	5	238	253	76.00	199.00	78.00	204.00	80.00	209.00	82.00	214.00
39	6	245	260	78.00	203.00	80.00	208.00	82.00	213.00	84.00	218.00
40	6.5	252	267	79.00	207.50	81.00	212.50	84.00	217.50	86.00	222.50
41	7.5	258	273	81.00	211.50	83.00	216.50	85.00	221.50	87.00	226.50
42	8	265	280	83.00	216.50	85.00	221.00	87.00	226.00	89.00	231.00
43	9	272	287	84.00	220.00	87.00	225.00	89.00	230.00	90.00	235.00
44	10	279	293	86.00	224.00	88.00	229.00	90.00	234.00	91.00	239.00
45	10.5	285	300	88.00	228.00	89.00	233.00	91.00	238.00	93.00	243.00
46	11.5	292	307	89.00	232.00	91.00	237.00	93.00	242.00	95.00	247.00

Piedro® - tabela wymiarowa

Rehabilitacyjne

Stabilizujące

Derotacyjne

Rozmiar buta		Długość stopy (mm)	Długość wkładki buta (mm)	Szerokość 5.5		Szerokość 6.5		Szerokość 7.5		Szerokość 8.5	
EU	UK			szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)	szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)	szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)	szerokość stopy (mm)	obwód stopy (mm)
15	0.5	90	100	49.00	128.50	51.00	133.50	53.00	138.50	55.00	143.50
16	1	96	106	50.00	132.50	52.00	137.50	54.00	142.50	56.00	147.50
17	1.5	102	113	52.00	136.50	54.00	141.50	56.00	146.50	58.00	151.50
18	2.5	109	120	54.00	140.50	56.00	145.50	57.00	150.50	59.00	155.50
19	3	115	127	55.00	144.50	57.00	149.50	59.00	154.50	61.00	159.50
20	4	121	133	57.00	148.50	59.00	153.50	60.00	158.50	62.00	163.50
21	5	128	140	58.00	152.50	60.00	157.50	62.00	162.50	64.00	167.50
22	5.5	134	147	60.00	156.50	62.00	161.50	64.00	166.50	66.00	171.50
23	6	140	153	62.00	160.50	64.00	165.50	65.00	170.50	67.00	175.50
24	7	147	160	63.00	164.50	65.00	169.50	67.00	174.50	69.00	179.50
25	8	153	167	65.00	168.50	67.00	173.50	68.00	178.50	70.00	183.50
26	8.5	159	173	67.00	172.50	68.00	177.50	70.00	182.50	72.00	187.50
27	9.5	166	180	68.00	176.50	70.00	181.50	71.00	186.50	73.00	191.50
28	10	173	187	70.00	180.50	71.00	185.50	73.00	190.50	75.00	195.50
29	11	179	193	71.00	184.50	73.00	189.50	74.00	194.50	76.00	199.50
30	12	185	200	73.00	188.00	74.00	193.00	76.00	198.00	78.00	203.00
31	12.5	192	207	74.00	191.50	76.00	196.50	78.00	201.50	80.00	206.50
32	13.5	198	213	75.00	195.00	78.00	200.00	79.00	205.00	81.00	210.50
33	1	205	220	77.00	199.00	79.00	204.00	81.00	209.00	83.00	214.00
34	2	212	227	78.00	203.00	81.00	208.00	82.00	213.00	84.00	218.00
35	2.5	218	233	80.00	207.00	82.00	212.00	83.00	217.00	85.00	222.00
36	3.5	225	240	81.00	211.00	83.00	216.00	85.00	221.00	87.00	226.00
37	4	232	247	83.00	215.00	85.00	220.00	86.00	225.00	88.00	230.00
38	5	238	253	84.00	219.00	86.00	224.00	88.00	229.00	90.00	234.00
39	6	245	260	86.00	223.00	88.00	228.00	89.00	233.00	91.00	238.00
40	6.5	252	267	88.00	227.50	89.00	232.50	91.00	237.50	93.00	242.50
41	7.5	258	273	89.00	231.50	91.00	236.50	92.00	241.50	94.00	246.50
42	8	265	280	90.00	236.00	92.00	241.00	94.00	246.00	96.00	251.00
43	9	272	287	91.00	240.00	94.00	245.00	96.00	250.00	98.00	255.00
44	10	279	293	93.00	244.00	96.00	249.00	97.00	254.00	99.00	259.00
45	10.5	285	300	95.00	248.00	97.00	253.00	98.00	258.00	100.00	263.00
46	11.5	292	307	97.00	252.00	98.00	257.00	100.00	262.00	102.00	267.00

Piedro® - tabela wymiarowa

DO ORTEZ

			Wąskie			Standardowe			Szerokie		
Rozmiar buta		Długość ortezy	wymiały ortezy			wymiały ortezy			wymiały ortezy		
UK	EU	(mm)	szer. (2) (mm)	obwód (3) (cm)	obwód (5) (cm)	szer. (2) (mm)	obwód (3) (cm)	obwód (5) (cm)	szer. (2) (mm)	obwód (3) (cm)	obwód (5) (cm)
4	20	119 - 124	55	15.50	21.8	62	17.00	23.0	69	18.50	24.5
5	21	125 - 131	56	16.00	22.5	63	17.50	24.0	71	19.00	25.2
5.5	22	132 - 137	57	16.50	23.3	65	18.00	24.5	72	19.50	26.0
6	23	138 - 143	59	16.85	24.0	66	18.40	25.0	73	19.85	26.8
7	24	144 - 150	60	17.20	24.7	68	18.80	25.6	74	20.20	27.6
8	25	151 - 156	62	17.60	25.4	69	19.15	26.0	76	20.60	28.3
8.5	26	157 - 162	63	18.00	26.2	70	19.50	27.5	78	21.00	29.0
9.5	27	163 - 169	64	18.40	27.1	72	19.90	28.2	80	21.30	29.8
10	28	170 - 176	66	18.70	28.0	74	20.30	29.0	81	21.80	30.6
11	29	177 - 182	68	19.10	28.5	76	20.65	29.6	82	22.15	31.2
12	30	182 - 188	69	19.50	29.0	78	21.00	30.2	83	22.50	31.8
12.5	31	189 - 195	70	19.85	29.8	79	21.50	31.0	84	22.85	32.5
13.5	32	196 - 201	71	20.20	30.6	80	22.00	31.8	85	23.20	33.2
1	33	202 - 208	72	20.40	31.2	82	22.25	32.5	86	23.60	33.9
2	34	209 - 215	74	20.90	32.0	84	22.50	33.3	87	24.00	34.6
2.5	35	216 - 221	75	21.20	32.6	85	22.85	33.9	88	24.50	35.3
3.5	36	222 - 228	76	21.70	33.3	86	23.20	34.5	89	25.00	36.0
4	37	229 - 235	78	22.20	34.1	87	23.60	35.2	90	25.30	36.7
5	38	236 - 241	79	22.60	35.0	88	24.00	36.0	91	25.60	37.5
6	39	242 - 248	80	23.10	35.8	89	24.50	36.9	92	25.95	38.2
6.5	40	249 - 255	82	23.50	36.7	90	25.00	37.8	93	26.50	39.0
7.5	41	256 - 261	84	23.85	37.4	91	25.50	38.4	94	26.85	39.9
8	42	262 - 268	85	24.20	38.0	92	26.00	39.0	95	27.20	40.8
9	43	269 - 275	86	24.70	38.8	93	26.50	39.7	96	27.50	41.4
10	44	276 - 282	88	25.10	39.6	94	26.85	40.5	97	27.90	42.0
10.5	45	283 - 288	89	25.50	40.2	96	27.20	41.4	98	28.30	42.7
11.5	46	289 - 295	90	25.85	41.0	97	27.60	42.2	99	28.80	43.4